

Contour[®] plus ONE[»]

Blood Glucose
Monitoring System

使用CONTOUR® DIABETES app 檢閱血糖值的血糖模式




如要更改您的治療方法、飲食和運動量，
先請諮詢您的醫療保健人員。



Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System


建立個人血糖模式My Patterns
可讓您知道自己的血糖水平趨勢及日常活動如何影響您的血糖水平。

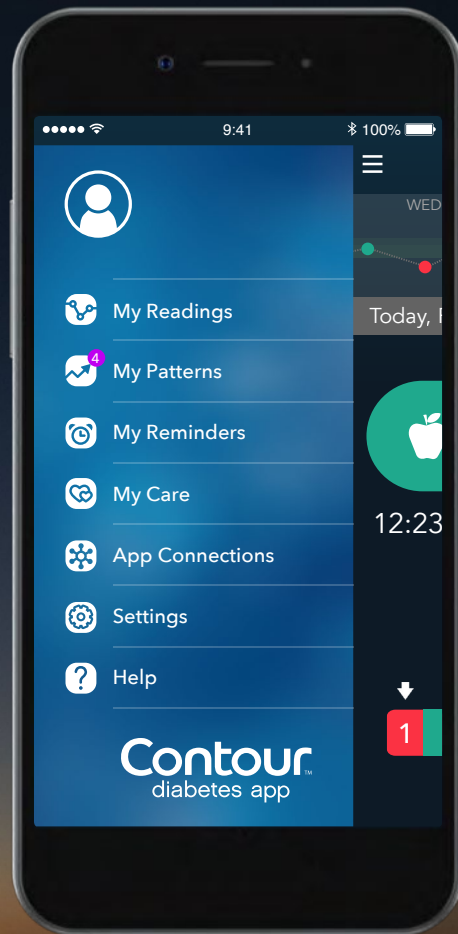

Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

1. 血糖模式 Patterns

當CONTOUR®DIABETES app偵測到血糖值的模式時，您會收到New Pattern Detected信息。

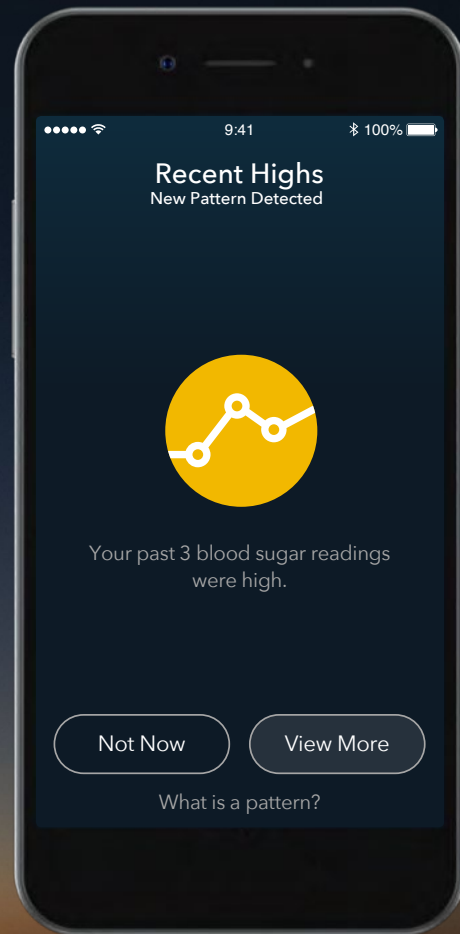


Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

1. 血糖模式 Patterns

當CONTOUR®DIABETES app偵測到血糖值的模式時，您會收到New Pattern Detected信息。


點按“View more”了解更多。

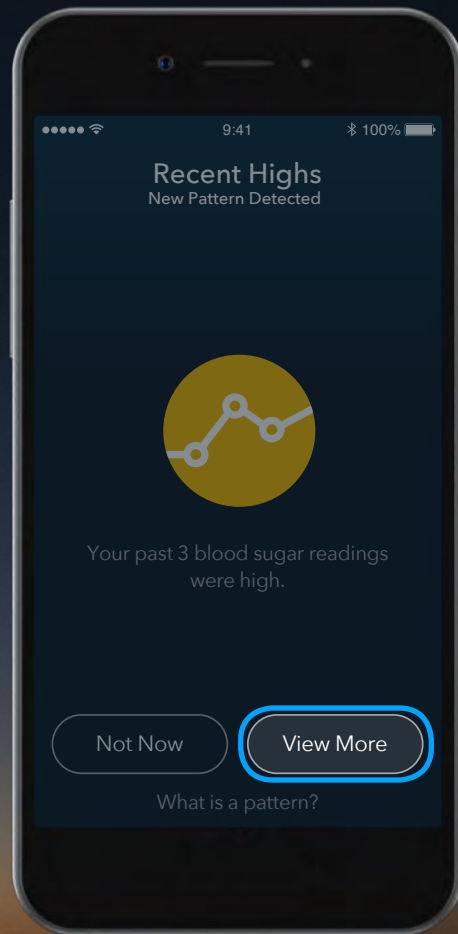

Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

2. 血糖模式 Patterns

最近高水平Recent Highs模式能告訴您過去3個高於目標血糖數值範圍的情況。

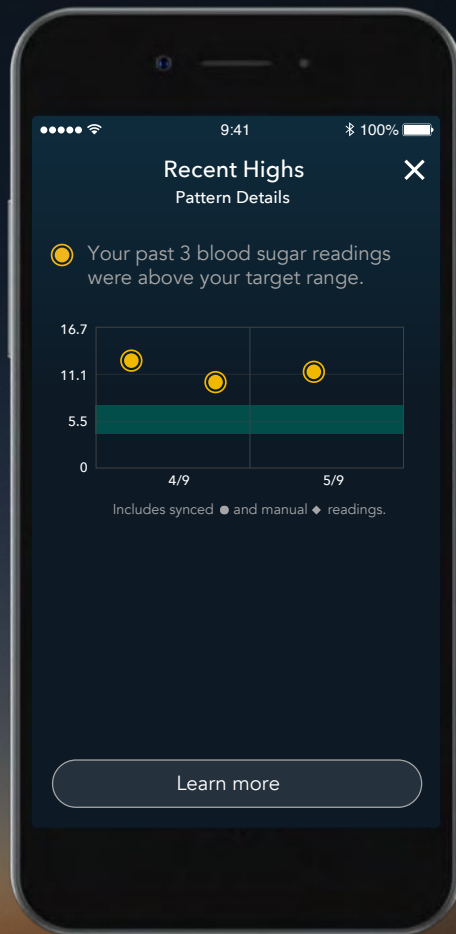

Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

2. 血糖模式 Patterns

最近高水平Recent Highs模式能告訴您過去3個高於目標血糖數值範圍的情況。


點按“Learn More”了解可能原因。



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

3. 血糖模式 Patterns


如果您知道引致高血糖值的原因，您可以在這裡選取，如飲食、藥物、活動或其他。

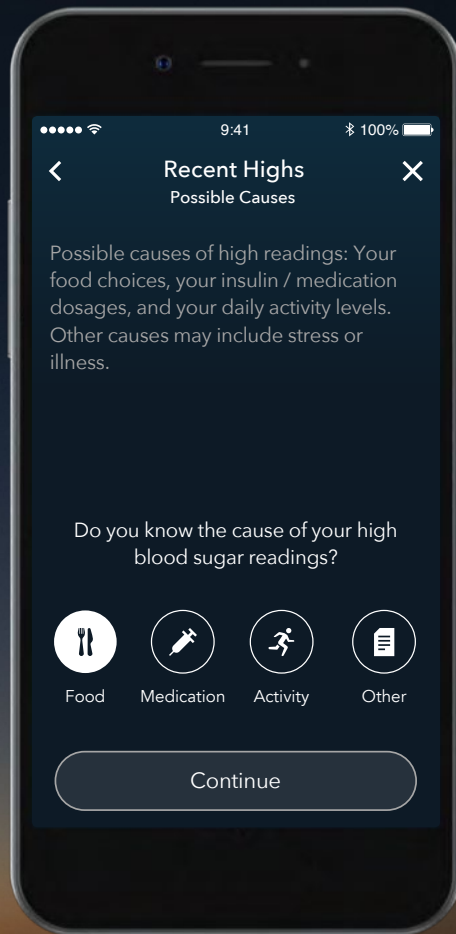

Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

3. 血糖模式 Patterns


如果您知道引致高血糖值的原因，您可以在這裡選取，如飲食、藥物、活動或其他。

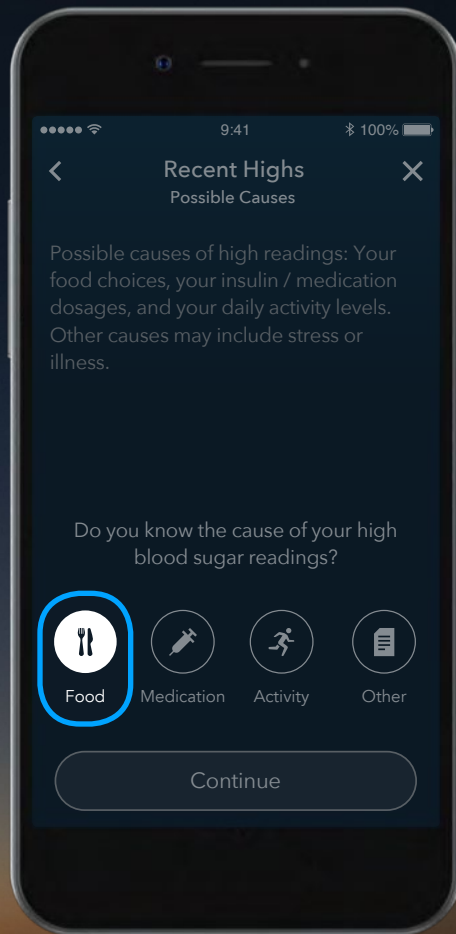

Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

4. 血糖模式 Patterns

CONTOUR®DIABETES app
能提供與此模式有關的資料。

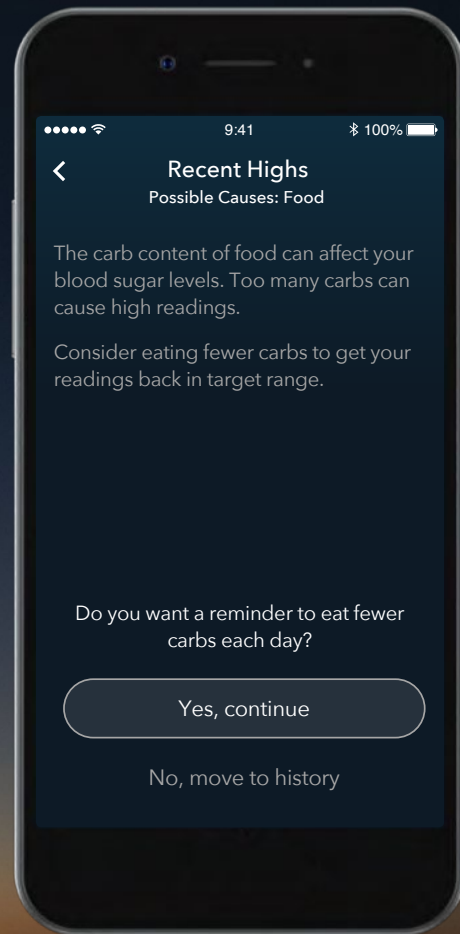

Contour
plus ONE[®]
Blood Glucose
Monitoring System

4. 血糖模式 Patterns

CONTOUR®DIABETES app
能提供與此模式有關的資料。


可選取**Yes, continue** 設定提醒每天減少進食含碳水化合物食物。



Contour
plus ONE[®]
Blood Glucose
Monitoring System

5. 血糖模式 Patterns

設定收到提醒的時間，以提醒每天減少進食含碳水化合物食物。

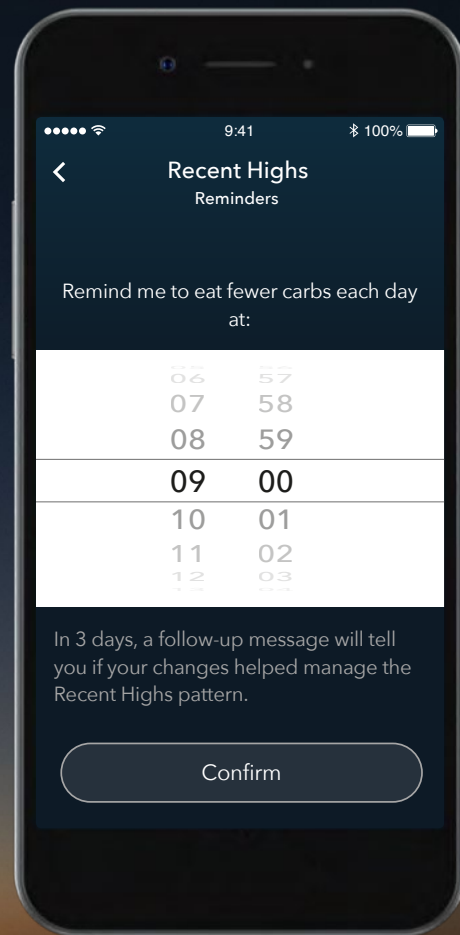


Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

5. 血糖模式 Patterns

設定收到提醒的時間，以提醒每天減少進食含碳水化合物食物。


點按“Confirm” 確定時間。

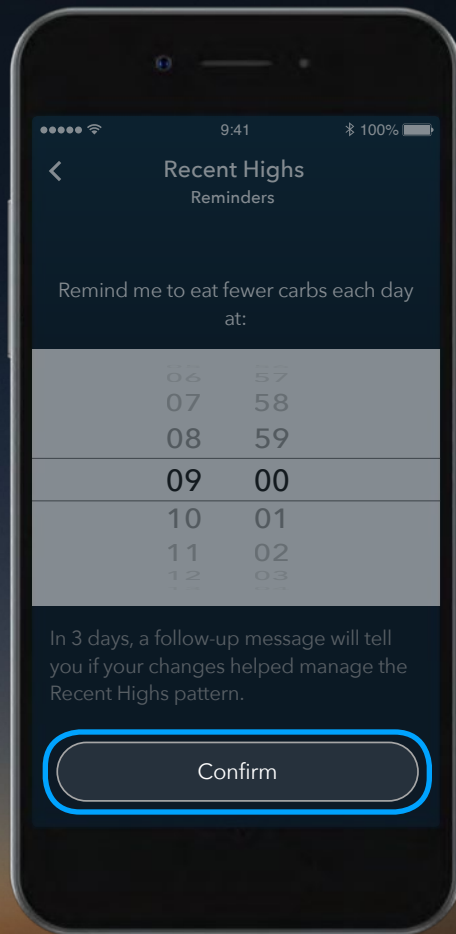

Contour[®]
plus ONE[™]
Blood Glucose
Monitoring System

6. 血糖模式 Patterns


在您選擇的時間到達時，您將會收到提醒信息。

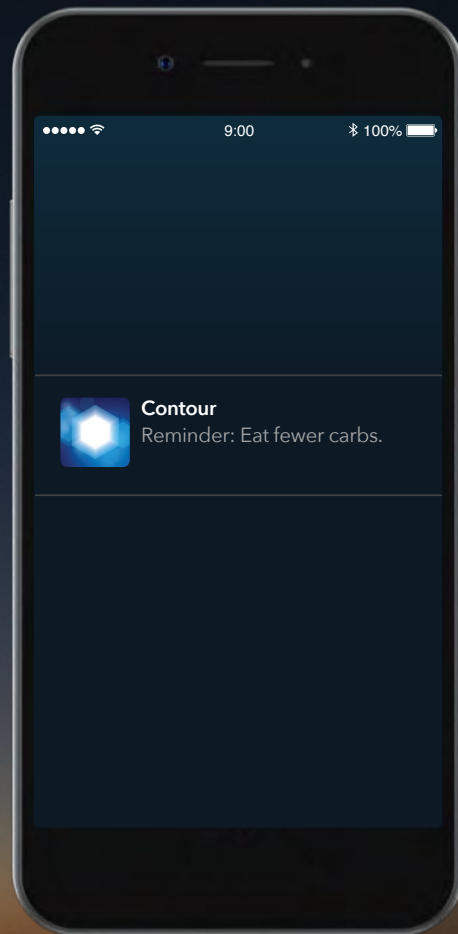

Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

6. 血糖模式 Patterns


在您選擇的時間到達時，您將會收到提醒信息。

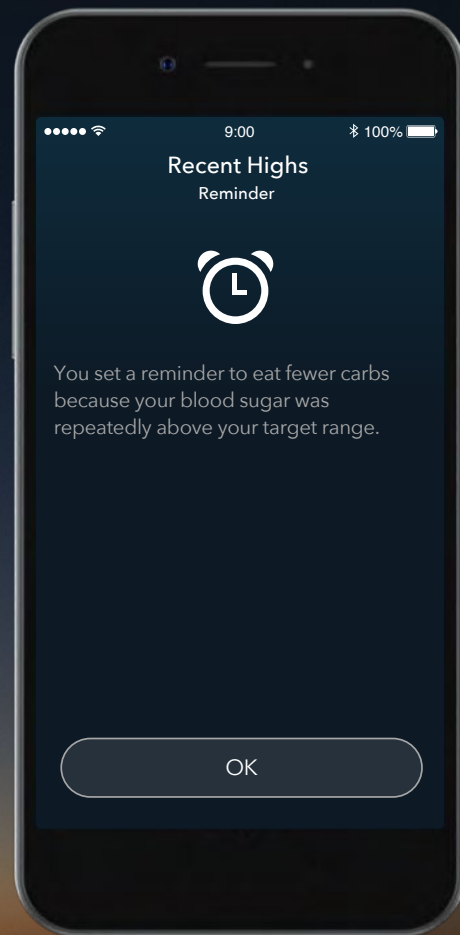

Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

7. 血糖模式 Patterns

在3天內，您會收到信息查看是否對於最近的高水平Recent Highs模式有所改善。

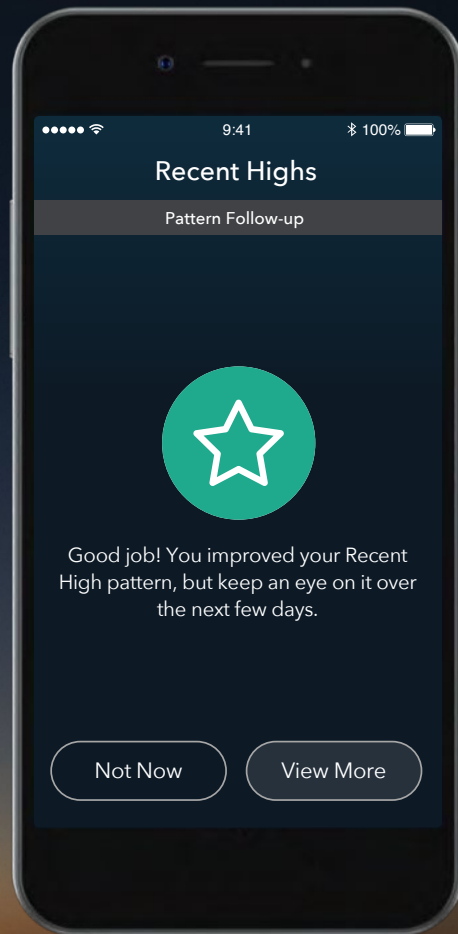


Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

7. 血糖模式 Patterns

在3天內，您會收到信息查看是否對於最近的高水平Recent Highs模式有所改善。


點按“View more”了解更多。

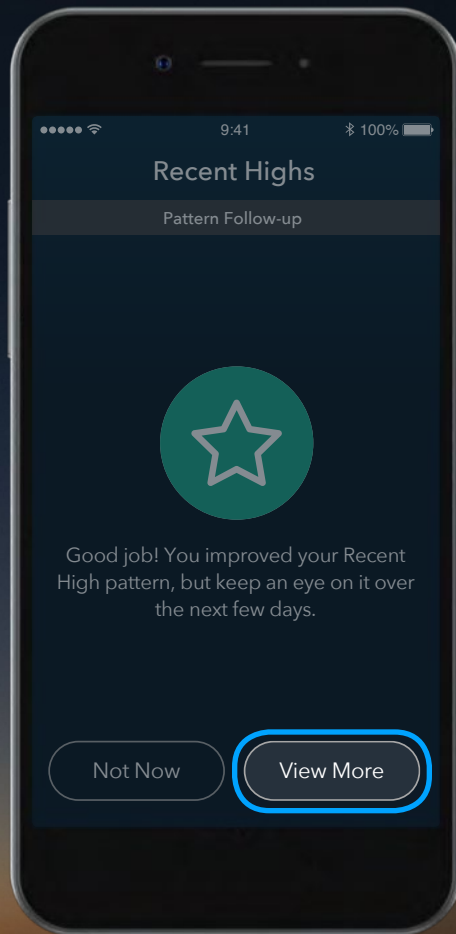

Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

7. 血糖模式 Patterns


這個血糖模式已移至歷史記錄。您可以從主頁中選取“**My Patterns**”查看記錄。

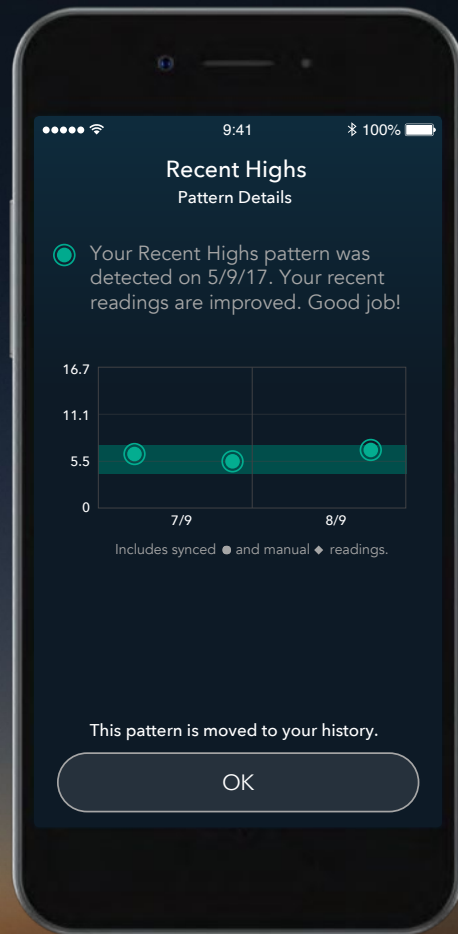

Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

8. 血糖模式 Patterns

您可以隨時在血糖模式記錄
”Pattern History“ 內加入更多
標記，有助提供更多資訊與您的
醫護團隊溝通。

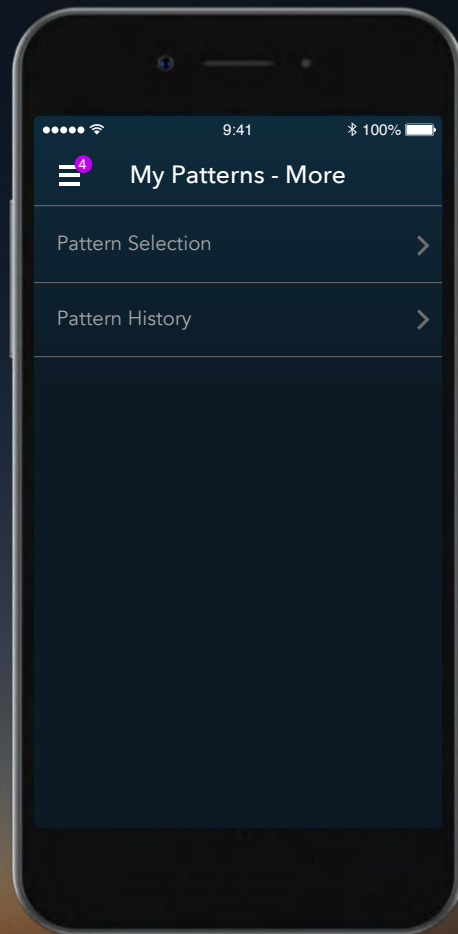

Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

8. 血糖模式 Patterns

您可以隨時在血糖模式記錄
”Pattern History“ 內加入更多
標記，有助提供更多資訊與您的
醫護團隊溝通。



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

如果您對**CONTOUR®PLUS ONE**智能血糖儀和**CONTOUR® DIABETES app**應用程式有任何疑問，請參閱產品使用指南，或向您的醫療保健人員查詢。

如慾了解更多產品資訊或有任何查詢，請瀏覽 contourplusone.hk 或 diabetes.ascensia.com。




此宣傳單張上的血糖記錄數據只供示範使用。
如要更改您的治療方法、飲食和運動量，先請諮詢您的醫療保健人員。



Apple 與 Apple 標誌為蘋果公司 (Apple Inc.) 所屬商標，並已於美國和其他國家註冊。App Store 為蘋果公司 (Apple Inc.) 的服務標記，Bluetooth® 之文字標記和標誌為藍芽技術聯盟 (Bluetooth SIG, Inc.) 擁有的註冊商標，健臻醫療保健 (Ascensia Diabetes Care) 對上述標誌的任何使用均須依據授權規定。Google Play 與 Google Play 標誌為 Google 公司 (Google Inc.) 所得商標。
Ascensia、Ascensia Diabetes Care 標誌、以及 Contour 均為健臻 (Ascensia Diabetes Care Holdings AG) 的商標和/或註冊商標。

Date of preparation: February 2018 Code: G.DC.10.2017.52579

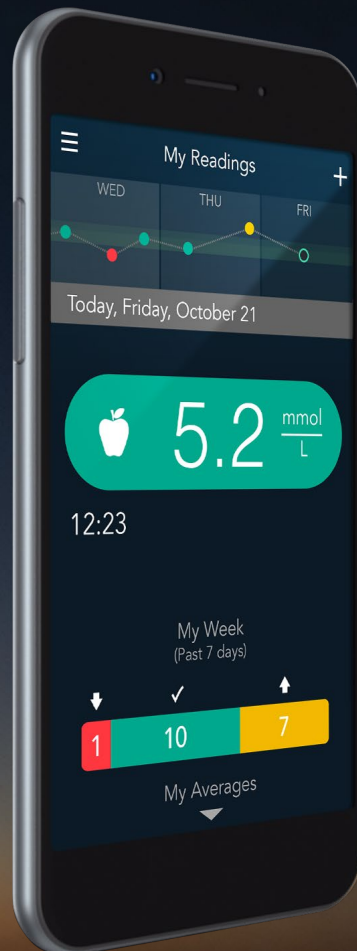

**Contour[®]
plus ONE[®]**
Blood Glucose
Monitoring System

The logo for Contour diabetes solutions is centered in the image. It features the word "Contour" in a large, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below "Contour" is the phrase "diabetes solutions" in a smaller, white, sans-serif font. The background is a dark blue gradient that transitions into a warm orange and yellow glow at the bottom, suggesting a sunset or sunrise over a horizon with silhouettes of trees.

Contour[®]
diabetes solutions